

Clearblue

Teste de gravidez

Com indicador de semanas

DIGITAL

- Se estiver testando no dia em que a menstruação deve iniciar, você pode testar a qualquer horário para descobrir se está grávida.
 - Se estiver testando antes, do dia em que a menstruação deve iniciar use a primeira urina do dia.
 - Para obter um resultado exato do Indicador de semanas, você tem que usar a primeira urina do dia.
 - Evite tomar líquido em excesso antes de realizar o teste.
- Leia este folheto com atenção antes de fazer um teste.**

1 Faça o teste

Quando estiver pronta para testar, retire o Medidor de teste da embalagem de papel laminado e retire a tampa azul. Use o Medidor de teste imediatamente.

Teste no fluxo da urina

- Segure o Coletor de amostras absorvente apontando para baixo no fluxo da urina por **5 segundos apenas**.
- Cuidado para não molhar o resto do Medidor de teste.
- Você pode recolocar a tampa e deixar o Medidor de teste na horizontal.



OU


Colete uma amostra de urina em um recipiente limpo e seco.

- Coloque apenas a ponta do Coletor de amostras absorvente na urina, como mostrado, **por 20 segundos apenas**.
- Você pode recolocar a tampa e deixar o Medidor de teste na horizontal.



2 Espere...

- O símbolo Espere pisca para mostrar que o teste está funcionando.
- Quando o símbolo Espere parar de piscar, seu resultado aparecerá. Se o símbolo Espere não aparecer depois que você usou o teste, consulte a pergunta 6 nas Perguntas e respostas.

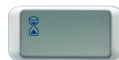

Durante o teste, **nunca** mantenha o Medidor de teste com o Coletor de amostras absorvente apontando para cima.

3 Veja seu resultado

O Teste de gravidez Clearblue DIGITAL tem um **Indicador de semanas** que fornece uma estimativa de quando você concebeu. Essa informação é mostrada no display, junto com o resultado 'Grávida'.

- Dentro de **3 minutos**, o display mostrará seu resultado.
- O resultado 'Grávida' pode aparecer no display **antes** do resultado do Indicador de semanas. **Continue esperando** até o símbolo Espere parar de piscar, para ver o resultado do Indicador de semanas. Isso pode demorar até 3 minutos.
- Alguns resultados podem ser mostrados em apenas 1 minuto.
- Seu resultado permanecerá no display durante aproximadamente 24 horas.
- Se o seu resultado for 'Grávida' consulte o seu médico e ele aconselhará o que você deve fazer a seguir. O médico irá calcular a fase da gravidez com base no primeiro dia da última menstruação.
- A concepção ocorre cerca de duas semanas antes do primeiro dia da próxima menstruação. O Indicador de semanas fornece uma estimativa de quando você concebeu.

- O Indicador de semanas é 92% preciso em detectar quando você concebeu. A estimativa é baseada no nível do hormônio de gravidez, hCG (Gonadotrofina coriônica humana) em sua urina. O nível de hCG varia em cada mulher, e portanto é possível que o Indicador de semanas forneça resultados enganosos ocasionalmente. A precisão do resultado 'Grávida'/'Não grávida' é acima de 99% quando testado a partir do dia em que a menstruação deve iniciar.

Erros do teste

Leia a seção "Erros do teste" se você usou o Medidor de teste e o display não mostra nenhum dos resultados nesta página.

Como interpretar os resultados

Resultados	Tempo desde a concepção	Como o médico calcula o tempo de gravidez (baseado em um ciclo de 28 dias)*
	Seu resultado é Não grávida Consulte a pergunta 12 nas Perguntas e respostas.	-
	Seu resultado é Grávida e você concebeu há aproximadamente 1-2 semanas atrás.	3-4 semanas
	Seu resultado é Grávida e você concebeu há aproximadamente 2-3 semanas atrás.	4-5 semanas
	Seu resultado é Grávida e você concebeu há mais de 3 semanas atrás.	5+ semanas

*O médico calcula o tempo de gravidez a partir do primeiro dia da sua última menstruação, e não a partir de quando você concebeu.

PERGUNTAS E RESPOSTAS

- Como o Teste de gravidez Clearblue DIGITAL funciona?** Quando você está grávida, seu corpo produz o hormônio da gravidez hCG (Gonadotrofina coriônica humana). A quantidade de hCG em seu corpo aumenta nas fases iniciais da gravidez. Clearblue pode detectar quantidades minúsculas desse hormônio em sua urina (a sensibilidade do teste é de 25 mUI/mL). Com base no nível de hCG na sua urina, o Indicador de semanas fornece uma estimativa de quando você concebeu.
- Qual é a precisão do Teste de gravidez Clearblue DIGITAL para detectar a gravidez?** O Teste de gravidez Clearblue DIGITAL tem precisão acima de 99% em testes de laboratório para detectar se você está grávida ou não, quando usado no dia em que a menstruação deve iniciar. Se você testar antes do dia em que a menstruação deve iniciar e obter o resultado "Não grávida", ainda há uma chance de que você esteja grávida. *Consulte a pergunta 4.*
- Qual é a precisão do Indicador de semanas do Teste de gravidez Clearblue DIGITAL?** O Indicador de semanas é 92% preciso em detectar quando você concebeu. A estimativa é baseada no nível do hCG em sua urina. O nível de hCG varia em cada mulher e, portanto, é possível que o Indicador de semanas forneça resultados enganosos ocasionalmente. Se você testar mais de 6 semanas depois da concepção, o Indicador de semanas pode dar resultados inesperados. Isso ocorre porque o nível de hCG na urina é muito alto para o teste fornecer uma estimativa exata do tempo desde a concepção.
- Quando eu posso testar com o Teste de gravidez Clearblue DIGITAL?** O Teste de gravidez Clearblue DIGITAL pode ser usado até 4 dias antes de sua menstruação iniciar. Se você testar antes do dia em que a menstruação deve iniciar e obter o resultado "Não grávida", ainda há uma chance de que você esteja grávida. Consulte no gráfico abaixo os resultados do teste clínico do Teste de gravidez Clearblue DIGITAL com amostras do início da gravidez.

Teste precoce

Clearblue recomenda que você teste a partir do dia em que a menstruação deve iniciar. No entanto, o hormônio de gravidez aumenta rapidamente no início da gravidez e o Teste de gravidez Clearblue DIGITAL pode ser usado para testar até 4 dias antes do dia em que a menstruação deve iniciar. Nos testes clínicos com amostras do início da gravidez, Clearblue DIGITAL Teste de gravidez apresentou os resultados a seguir:

Número de dias antes do dia em que a menstruação deve iniciar	-1	-2	-3	-4
% de amostras de mulheres grávidas que apresentam o resultado 'Grávida'	98%	97%	86%	55%

Se o resultado for "Não grávida" e ainda existe suspeita de gravidez *Consulte a pergunta 12*. Para saber o dia em que a menstruação deve iniciar, calcule a duração do seu ciclo habitual contando o número de dias desde primeiro dia da menstruação até o dia antes que a próxima menstruação se inicia.

- Se você tiver ciclos irregulares, conte o seu ciclo mais longo nos últimos meses antes de fazer o teste.
 - Se você não tem ideia de qual é o dia em que a menstruação deve iniciar, recomendamos não testar menos de 19 dias depois da última vez em que você teve relação sexual sem proteção.
 - Algum medicamento ou condição médica pode afetar o resultado?**
 - Leia sempre as instruções do fabricante do medicamento que você está tomando antes de fazer o teste.
 - Medicamentos para fertilidade contendo hCG podem dar resultados enganosos (geralmente, esses medicamentos são injetados e testar logo após a administração pode dar um falso resultado "Grávida").
 - Outras terapias de fertilidade (como citrato de clomifeno), analgésicos e contraceptivos hormonais (por exemplo, pílula anticoncepcional) não devem afetar o resultado.
 - Se você deixou de usar recentemente a contracepção hormonal ou faz terapias de fertilidade com por exemplo o citrato de clomifeno, sua menstruação pode ser irregular e isso fará você testar muito cedo.
 - Se você engravidou recentemente (mesmo que a gravidez não tenha ido até o final), pode obter um resultado "Grávida" falso.
 - Se você está na menopausa ou se aproximando, pode obter um resultado "Grávida" falso, embora não esteja grávida. Em um estudo com mulheres perimenopáusicas e menopáusicas não grávidas, testadas com lotes diferentes do Teste de gravidez Clearblue DIGITAL, em média 0,2% dos resultados foram "Grávida", com uma faixa de 0% a 0,5% para lotes diferentes. Todos os resultados falsos eram de mulheres acima de 50 anos.
 - Gravidez ectópica e cistos ovarianos podem dar resultados enganosos.
 - Uma gravidez com múltiplos fetos e a gravidez ectópica podem dar resultados enganosos do Indicador de semanas.
 - A perda natural da gravidez pode ocorrer nas primeiras fases. Se você teve um resultado "Grávida" é possível que mais tarde descubra que não está grávida, devido à perda natural da gravidez. Nessas circunstâncias, o Indicador de semanas pode dar resultados inesperados.
- Se você tiver resultados inesperados, converse com seu médico.

- Eu usei o teste, mas o símbolo Espere não apareceu. O que significa isso?** O teste não funcionou corretamente. *Consulte Erros do teste.*
- Eu usei o teste, mas nenhum resultado apareceu no display. O que significa isso?** O resultado deve aparecer no display dentro de 3 minutos. Se nenhum resultado aparecer, *consulte Erros do teste.*
- Meu teste diz que eu estou grávida. O que eu devo fazer?** Se o seu resultado for "Grávida" consulte o seu médico e ele aconselhará o que você deve fazer a seguir. O Indicador de semanas é apenas uma estimativa de quando a concepção ocorre. O médico irá calcular a fase da gravidez com base no primeiro dia da última menstruação. A concepção ocorre cerca de duas semanas antes do primeiro dia da próxima menstruação.

- Meu teste diz que eu estou grávida, mas eu não acho que concebi na data em que o Indicador de semanas indica. Isso é possível?** O Indicador de semanas é 92% preciso quando o teste usa a primeira urina do dia. Alguns medicamentos ou condições médicas podem afetar o resultado. *Consulte a pergunta 5.*
- Eu testei ontem e o resultado foi "Grávida". Eu testei hoje novamente, e de acordo com o Indicador de semanas, o número de semanas desde que eu concebi diminuiu. O que eu devo fazer?** O nível de hCG flutua enquanto ele aumenta, portanto é possível que o Indicador de semanas forneça resultados inesperados se você testar em dias consecutivos. Teste novamente em 5 dias e, se os resultados do Indicador de semanas ainda mostrarem que o número de semanas desde que você concebeu diminuiu, *consulte a pergunta 11.*
- Eu testei uma semana atrás e o resultado foi "Grávida". Eu testei novamente, e de acordo com o Indicador de semanas, o número de semanas desde que eu concebi diminuiu. O que eu devo fazer?** Se você testou de acordo com as instruções, usando a primeira urina do dia em ambas as ocasiões, e o Indicador de semanas deu resultados inesperados, consulte seu médico.
- Meu teste indica "Não grávida". O que eu devo fazer?** Você pode não estar grávida, ou seu nível de hormônio da gravidez ainda não está alto o suficiente para ser detectado, ou então você calculou errado o dia em que a sua menstruação deve iniciar.
 - Se você testou muito cedo, teste novamente no dia em que a menstruação deve iniciar.
 - Se o primeiro dia da menstruação já passou, teste novamente em 3 dias. Se o teste der o resultado "Não grávida" e você ainda não menstrou, consulte o seu médico.

ERROS DO TESTE

- Erro do livro** - um erro ocorreu durante o teste. Pode ser que:
- O Coletor de amostras absorvente não foi mantido apontando para baixo ou o Medidor de teste não ficou na horizontal depois que a urina foi aplicada.
 - A quantidade de urina aplicada foi excessiva ou insuficiente.
- Você deve testar novamente usando um novo teste, tomando o cuidado de seguir as instruções.
- Erro de espaço vazio**
O teste não funcionou como esperado. Pode ser que as instruções de uso não foram seguidas. Você precisará realizar outro teste. Siga as instruções de uso com atenção.

DESCARTANDO O SEU TESTE

Remova a bateria antes de descartar o Medidor de teste. O descartar da bateria deve ocorrer conforme o esquema de reciclagem apropriado. Para remover, insira uma moeda na fenda e gire para abrir a parte posterior do Medidor de teste. Se a bateria não estiver visível, deslize o suporte na direção da seta para ajudar na remoção. **Cuidado:** Não desmonte, recarregue ou descarte as baterias no fogo.

0800 047 4467
As chamadas são gratuitas de telefones fixos, mas as chamadas de celulares podem ser cobradas; verifique com sua operadora. Se nenhum consumidor que fale português estiver disponível, você pode falar conosco em inglês ou com a ajuda de um tradutor. Tenha em mãos os números de telefone da embalagem externa e interna. As chamadas são gratuitas para fins de treinamento e controle de qualidade.

www.clearblue.com

Fabricado por: Alere (Shanghai) Diagnostics Co., Ltd. 151 Liling Road, Min Zhangjing Lu, 2º andar, Pudong District, Shanghai 201203, China para SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH, Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Genebra, Suíça.
© 2015 SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH. Todos os direitos reservados. Clearblue é uma marca registrada.

Aparelho para uso caseiro. Para uso em diagnóstico *in vitro* apenas. Não previsto para uso interno. Usar uma única vez. Mantenha fora do alcance de crianças. Deslize a tampa anterior durante 30 minutos antes de testar, se armazenado refrigerado. Não usar se a embalagem de papel laminado que contém o Medidor de teste estiver danificada. Não usar o Medidor de Teste após a data de validade. Este produto contém baterias. Descarte conforme os regulamentos locais. Autoteste para orientação de gravidez sem fins diagnósticos. Composição: cada teste contém anticorpo monoclonal anti-beta hCG, anticorpo monoclonal anti-alfa TSH, IgG de cabra anti-coelho, IgG de coelho e partículas de látex. Dados obtidos a partir de estudos disponíveis em www.clearblue.com.br/referenciasbibliograficas IMPORTADOR: Emergo Brazil Importação e Distribuição de Produtos Médicos Hospitalares Ltda. SIA Trecho 3, Lotes 2010/2020, 1º Andar, Ed. Myrian Bairro: Zona Industrial Cidade: Brasília/DF - CEP: 71.200-200 CNPJ: 04.987.408/0001-98 Responsável Técnico: Julia Zema Pimenta PINTO CRF/DF-2508 Registro ANVISA Nº: 80117580220

	Aparelho de diagnóstico médico <i>in vitro</i>		Código do lote		Não reutilize
	Limite de temperatura 2°C - 30°C		Usar até		Fabricante